


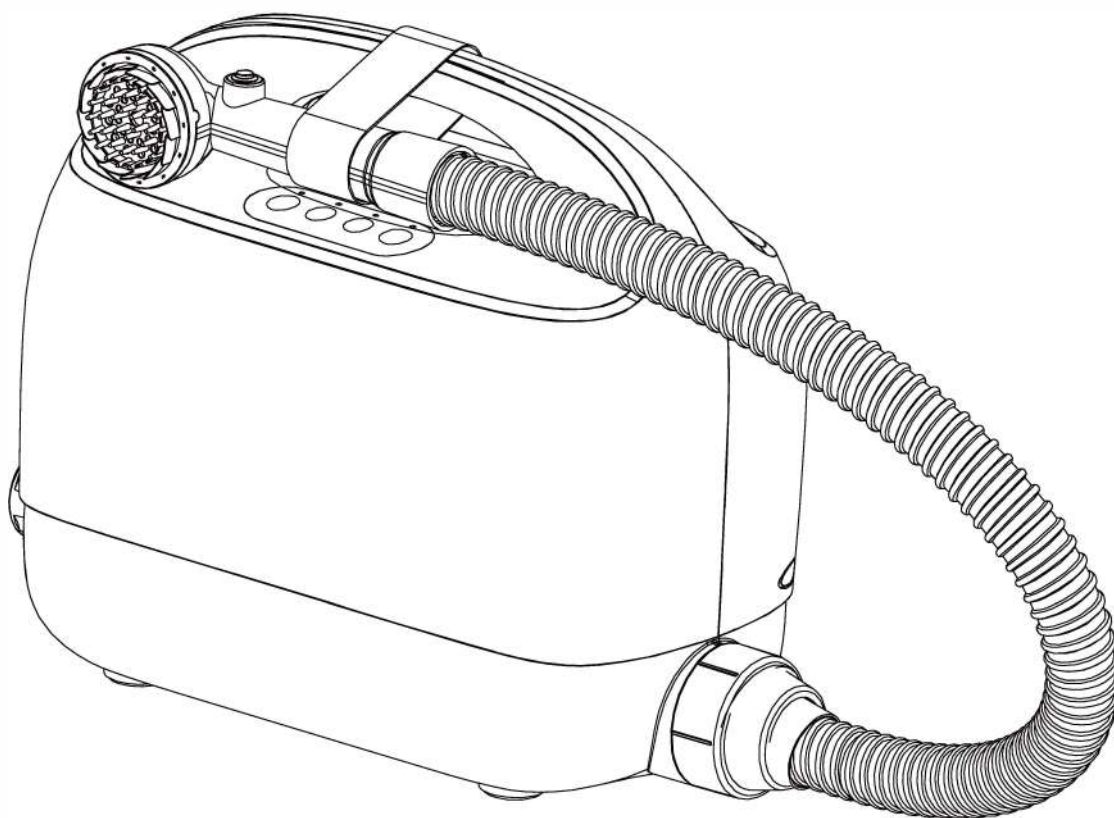

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA PĀRNĒSĀJAMĀ GULTAS DUŠAS IEKĀRTA

Saturs

1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai	01
2. Īss ievads	03
2.1 Piederumu saraksts	03
2.2 Daļu vienību nosaukumi	03
2.2.1 Galvenās	03
2.2.2 Funkciju pogas apraksts (kā parādīts)	04
2.2.3 Funkciju pogu izmantošana	04
2.2.4 Mūzikas atskaņošanas vadība	04
2.2.5 Bojājuma gaismas indikators un balss uzvednes	04
2.3 Tīra ūdens izplūdes slēdža izmantošana (kā parādīts attēlā)	05
2.4 Ieslēgšana/izslēgšana	05
3. Uzstādīšanas metode	06
3.1 Silikona/sūkļa dušas un sprauslu uzstādīšana	06
3.2 Ūdens ieplūdes caurules un drenāžas caurules uzstādīšana	06
3.3 Dušas galviņas uzstādīšana kopā ar galveno ierīci	07
3.4 Uzstādiet adapteri ar galveno ierīci	07
4. Produkta lietošana	08
4.1 Sagatavošanās pirms ierīces iedarbināšanas	08
4.2 Pārbaude un sagatavošana pirms dušas	08
4.3 Tīrīšanas/skrubēšanas darbības soļi	09
4.4 Matu mazgāšanas darbības soļi	11
4.5 Dušas darbības soļi	13
4.6 Sakopšana pēc lietošanas	14
4.7 Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana (kā parādīts)	15
5. Izplatītāko problēmu novēršanas metodes	16
6. Ierīces specifikācijas	16
7. Apkope	17
8. Produkta pārstrāde	19
9. Garantija	19
9.1 Garantijas atspoguļojums	19
9.2 Garantijas izņēmumi	19

Lietošanas norādes

Pārvietojamā dušas iekārta nodrošina dušu vecāka gadagājuma un gultas pacientiem. Izmantojot šo ierīci, aprūpētāji var veikt dušas procedūru, mazgāt matus un ķermeņa tīrīšanu pacientiem, kuri atrodas gultā. Notekūdeņi tiek atgriezti galvenajā iekārtas daļā, neaptraipot gultas veļu un apģērbu.

1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet sadaļu "Drošības pasākumi" un izmantojiet tos pareizi.

Šeit norādītie piesardzības pasākumi ir klasificēti kategorijās "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU!", lai novērstu cilvēkiem apdraudējumu vai traumatisma riskus. Lūdzu, stingri ievērojiet šos svarīgos drošības piesardzības pasākumus.

- **Uzmanību:** Nepareizas ierīces lietošanas gadījumā pastāv nāves vai nopietna traumatisma iespējamība. 
- **Brīdinājums:** Ja ar ierīci rīkojas nepareizi, tas var izraisīt savainojumus vai cita rakstura traumatismu. 

Uzmanību 	
Brīdinājumi lietošanai 	• Iesūknējot lielas svešķermeņu daļiņas, ierīces darbība nekavējoties jāpārtrauc. Pirms lietošanas lūdzam izņemt svešķermeņus;
	• Ja galvenais bloks grab, lūdzam nekavējoties pārtraukt lietot ierīci. Pirms lietošanas izslēdziet galvenā bloka grabošās daļas;
	• Dušas galviņu ieteicams lietot tikai vienai personai; ja jāizmanto citam, pirms lietošanas to jādezinficē ar medicīnisku līdzekli.
	• Pēc lietošanas ir nepieciešama tīrīšana un apkope, piemēram, ūdens padeves un drenāžas sistēmas atlikušie netīrumi, kas var izraisīt pelējuma, dažādu baktēriju un smaku veidošanos.
	• Šai ierīcei nepieciešama speciāla apmācība. Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
	• Izmantojiet jauno šļūtenes komplektu, kas tika piegādāts kopā ar ierīci. Veco šļūtenes komplektu nevar izmantot atkārtoti.
	• Ierīcei pašai nav sterilizācijas un dezinfekcijas funkcijas, tāpēc mēs neesam atbildīgi par nezināmām bakteriālām infekcijām un slimību pārvešanu.
	• Ierīce jālieto tikai ar tās komplektā iekļauto barošanas avotu.
• Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.	








Brīdinājums

Aizliegumi lietošanai




- Aizliegts lietot cilvēkiem ar ādas brūcēm vai apsārtumu un pietūkumu;
- Aizliegts lietot kritiski slimiem cilvēkiem bez ārsta ieteikuma;
- Aizliegts iegremdēt visu ierīci ūdenī vai skalot to ar ūdeni;
- Aizliegts lietot tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, petrolejai, benzīnam, akmeņogļu gāzei u.c.;
- Aizliegts lietot karsta avota tuvumā vai vietās;
- Aizliegts atvienot strāvas padeves avotu ar mitrām rokām;
- Aizliegts izjaukt, remontēt vai pārveidot visu ierīci;
- Aizliegts lietot, kamēr dušas galviņa ir izjaukta, pretējā gadījumā tā nedarbosies pareizi;
- Aizliegts izmantot bojātus piederumus un priekšmetus, kurus nav ražojis mūsu uzņēmums;
- Aizliegts izmantot viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamus materiālus, piemēram, hlora balinātājus, šķīdinātājus, anilīnu, insekticīdus u.tml.;
- Aizliegts lietot, ja ir aizsprostota iesūkšanas vai izplūdes atvere;
- Aizliegts novietot silikona matu mazgāšanas galviņu pie ausīm, acīm, deguna, mutes tuvumā;
- Aizliegts iegremdēt tīrā ūdens izplūdes slēdzi ūdenī;
- Aizliegts iesūkt putekļus utt., kas var izraisīt ūdens caurules un motora aizsērēšanu;
- Aizliegts maziem bērniem ar ierīci spēlēties;
- Tīrīšanu un ierīces apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

2.1 Piederumu saraksts

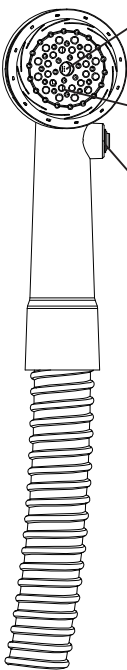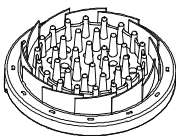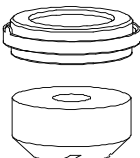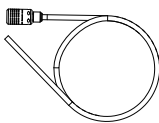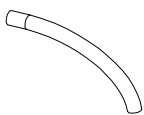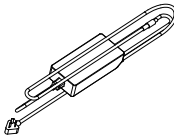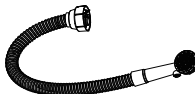
 Ūdens ieplūdes caurule Netīrā ūdens atpakaļsūkšanas caurums Tīrā ūdens izplūdes slēdzis	 Silikona dušas galviņa matu mazgāšanai	 Sūklis dušas galvas ādas tīrīšanai ar sūkļa dušas galvas pārvalku	 Tīrā ūdens caurule un filtrs
	 Netīrā ūdens izplūdes šļūtene	 Strāvas adapteris	 Dušas caurule notekūdeņu sūkšanai, iebūvēta tīrā ūdens izvadīšanas caurule

2.2 Daļu vienību nosaukumi

2.2.1 Galvenās

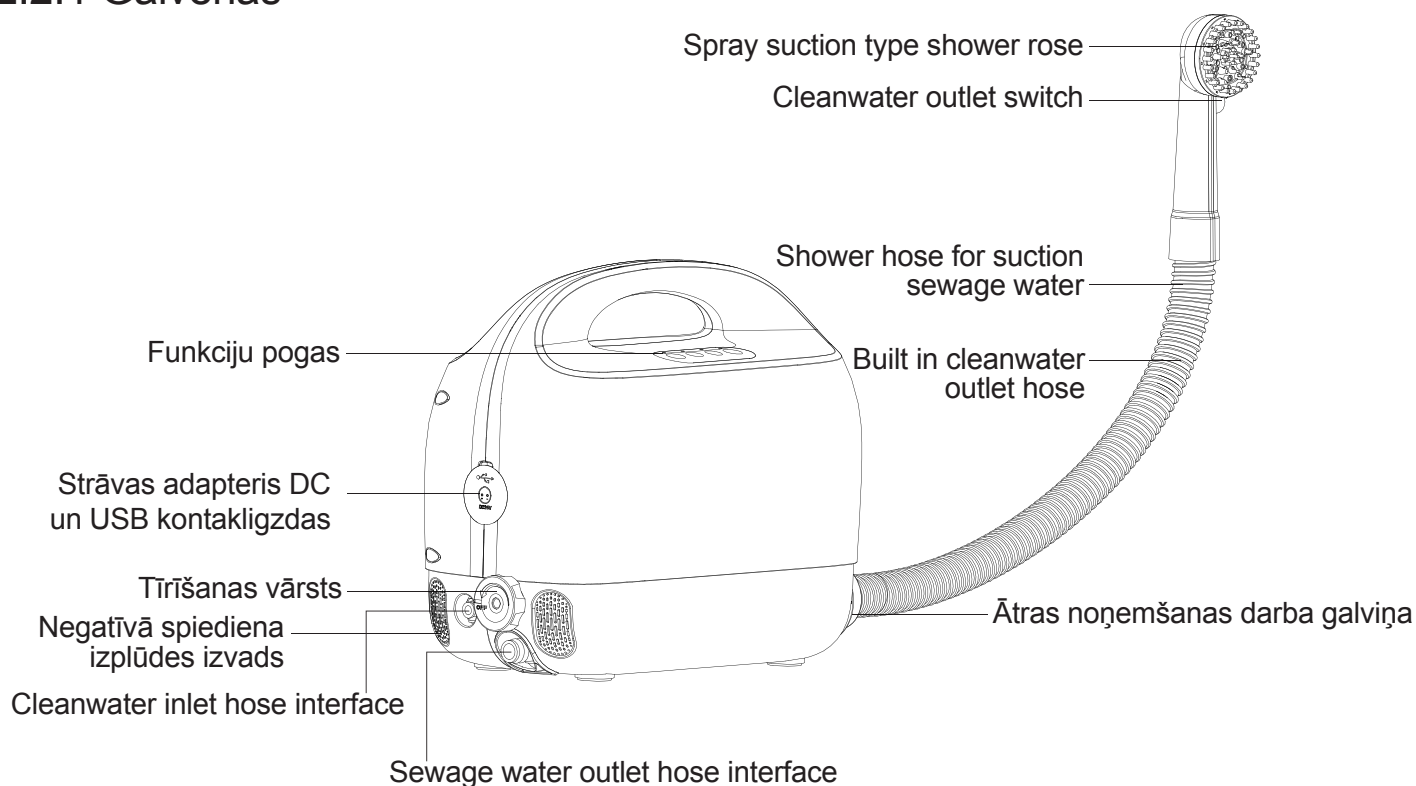

2.2.2 Funkciju pogas apraksts (kā parādīts)

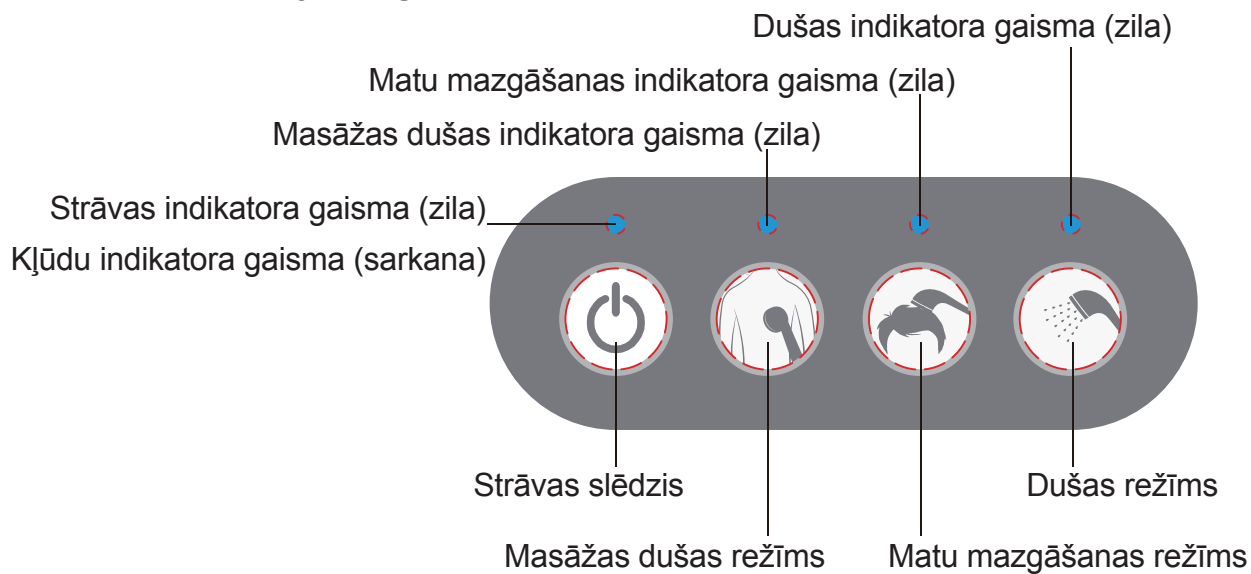

2.2.3 Funkciju pogu izmantošana

2.2.3.1 Trīs funkcionāliem režīmiem - tīrīšana, matu mazgāšana un duša - ir divas iespējas: parastais un uzlabotais režīms;

2.2.3.2 Kad funkcija ir izslēgta, īsi nospiediet funkciju pogu, lai ieslēgtu atbilstošo funkciju, un noklusējuma iestatījums ir parastais jaudas režīms;

2.2.3.3 Pēc funkcijas ieslēgšanas, īsi nospiežot funkciju pogu, tiek pārslēgts uz uzlabotu režīmu, un balss uzvednē tiek paziņots: "Pārslēgts uz uzlabotu režīmu". Vēlreiz nospiežot funkciju pogu, ierīce pārslēdzas uz normālu režīmu, un balss uzvednē tiek eikts: "Pārslēgts uz normālu režīmu";

2.2.3.4 Pēc funkcijas ieslēgšanas, ilgi nospiediet funkciju pogu, lai funkciju izslēgtu;

2.2.3.5 Pēc funkcijas ieslēgšanas, īsi nospiežot pogu citas funkcijas izvēlei, tiks deaktivizēta pašreizējā funkcija un aktivizēta izvēlētā funkcija.

2.2.4 Mūzikas atskaņošanas vadība

2.2.4.1 Tūlīt pēc ieslēgšanas noklusējuma mūzika ir izslēgta;

2.2.4.2 Īsi nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu mūziku, un īsi nospiediet barošanas pogu vēlreiz, lai izslēgtu mūziku;

2.2.4.3 Pēc mūzikas ieslēgšanas ievietojiet USB disku (ar MP3 formāta mūzikas failiem USB disks atbalsta tikai FAT16 un FAT32 failu sistēmu, ietilpība nepārsniedz 32G), un pēc tam mūzika tiks atskaņota no USB diska.

2.2.5 Bojājuma gaismas indikators un balss uzvednes

2.2.5.1 [Galvenās ierīces slīpums vairāk nekā 35 grādos, trauksmes signāls]: Bojājuma sarkanā gaismā paliek ieslēgta, jaudas zilā lampiņa ir izslēgta, balss atkārtoti pārraida "Ierīce sasveras, lūdzu, izlabojiet". Atkārtojiet 10 sekunžu intervālā. Šīs kļūmes risinājums: novietojiet iekārtu līdzenā stāvoklī;

2.2.5.2 [Raidītāja ūdens iekļūšanas trauksme]: Bojājuma sarkanā gaisma mirgo (ieslēgta uz 1 sekundi, izslēgta uz 1 sekundi), strāvas zilā gaisma ir izslēgta, balss atkārtoti pārraida "Raidītāja kļūme, lūdzu, uzgaidiet pirms atkārtota mēģinājuma, kamēr pazūd kļūdas indikators."; Atkārtojuma cikls ir 10 sekundes. Šīs kļūmes risinājums: pēc 1 minūtes klusuma nogaidiet, iekārta dabiski izvadīs gaisa filtrā uzkrāto ūdeni;

2.2.5.3 [Netīrumu sūkšanas motora kļūme]: Bojājuma sarkanā lampiņa ātri mirgo (ieslēgta uz 0,12 sekundēm, izslēgta uz 0,12 sekundēm), ieslēdzas jaudas zilā lampiņa, balss vienreiz paziņo "Netīrumu iesūkšanas kļūme". Šīs kļūmes risinājums: uzgaidiet 3 sekundes, pēc tam mēģiniet ierīci lietot atkārtoti;

2.2.5.4 [Ūdensūkņa motora kļūme]: Bojājuma sarkanā lampiņa lēni mirgo (ieslēdzas uz 2 sekundēm, izslēdzas uz 2 sekundēm), jaudas zilā lampiņa nodziest, balss vienreiz paziņo: "Ūdens izsmidzināšanas kļūme". Šīs kļūmes risinājums: uzgaidiet 3 sekundes, pēc tam mēģiniet ierīci izmantot atkārtoti;


2.2.5.5 [Atvērta iztukšošanas vārsta trauksme]: Bojājuma sarkanā gaisma nodziest, strāvas zilā gaisma ātri mirgo (ieslēdzas uz 0,35 sekundēm, izslēdzas uz 0,35 sekundēm), balss paziņo: "Iztukšošanas vārsts ir atvērts, notiek iztukšošana. Lūdzu, aizveriet vārstu pēc iztukšošanas pabeigšanas". Šīs kļūmes risinājums: lai to novērstu, vienkārši aizveriet iztukšošanas vārstu;

2.2.5.6 [Pilnas netīrā ūdens tvertnes trauksmes signāls]: Bojājuma sarkanā gaisma ir izslēgta, strāvas zilā gaisma pārmaiņus mirgo (ieslēdzas uz 1 sekundi, izslēdzas uz 1 sekundi), balss paziņo, ka "netīrā ūdens tvertne ir pilna, lūdzu, iztukšojiet tvertni". Šīs kļūmes risinājums: atveriet iztukšošanas vārstu, lai to iztukšotu, līdz netīrā ūdens tvertne vairs nav pilna.

2.3 Tīra ūdens izplūdes slēdža izmantošana (kā parādīts attēlā)

2.3.1 Ieslēdziet tīrīšanas/matū mazgāšanas/dušas režīmu, nospiediet tīra ūdens izplūdes vadības pogu, lai izsmidzinātos tīrais ūdens. Ja atlaidīsiet pogu, tīrais ūdens pārtrauks izsmidzināties;

2.3.2 Kad visi režīmi (mazgāšana, matu mazgāšana, duša) ir izslēgti, tīrs ūdens nevar izsmidzināties neatkarīgi no tā, vai vadības poga tiek nospiesta vai atlaista.

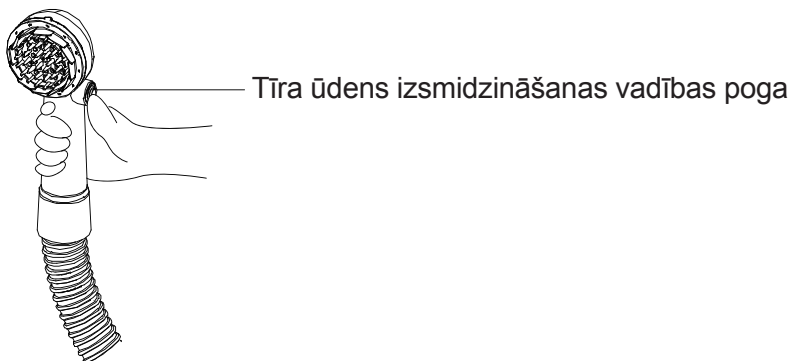

2.4 Ieslēgšana/izslēgšana

2.4.1 Nospiediet un pieturiet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu galveno ierīci. Jaudas indikators iedegas zilā krāsā, un atskan balss paziņojums "Ierīce ir ieslēgta";

2.4.2 Nospiediet un pieturiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu galveno ierīci. Visas indikatoru gaismas un funkcijas tiks izslēgtas, un balss pavēstīs "Ierīce izslēdzas";

2.4.3 Pēc ieslēgšanas, ja tā ir ilgāka par 30 minūtēm, neizmanto nevienu funkciju (mazgāšana, matu mazgāšana, dušas režīms), ierīce automātiski izslēgsies.


3. Uzstādīšanas metode

3.1 Silikona/sūkļa dušas un sprauslu uzstādīšana

3.1.1 Silikona dušas galviņa tiek izmantota matu mazgāšanai, bet sūkļa dušas galviņa - skrubēšanai un dušai;


3.1.2 Uzstādot silikona dušas galviņu, salāgojiet to ar sprauslu, iesprauciet to uz iekšpusi un cieši piespiediet, lai to nostiprinātu;

Kā parādīts diagrammā:

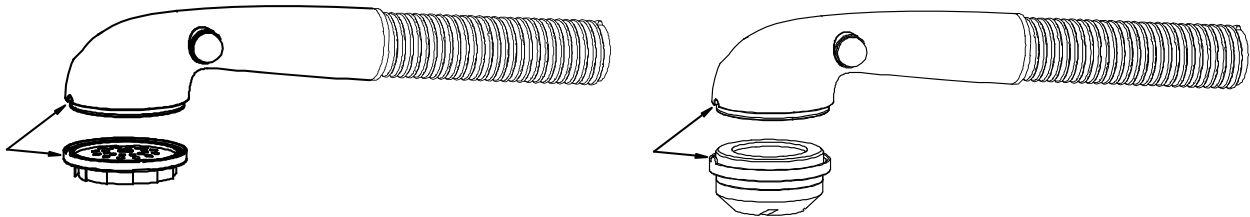


3.2 Ūdens ieplūdes caurules un drenāžas caurules uzstādīšana

3.2.1 Noņemiet silikona aizbāzni no ūdens ieplūdes caurules un tīra ūdens izplūdes caurules, paturiet tās vēlākai lietošanai. Pēc tam salāgojiet tīrā ūdens cauruli (ar filtru) ar galvenās ierīces tīrā ūdens caurules saskarni un iebīdiet to tieši galvenajā ierīcē.

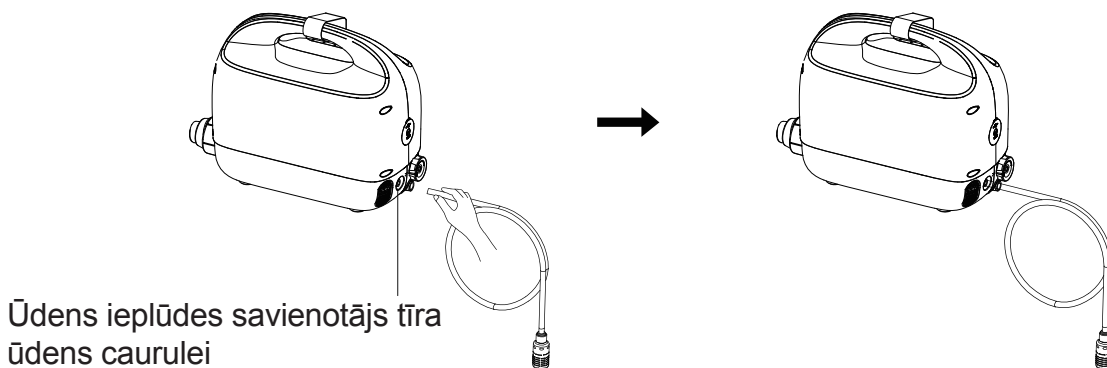


3.2.2 Salāgojiet drenāžas cauruli ar galvenā bloka ierīces atveri un iebīdiet to tieši galvenajā ierīcē.

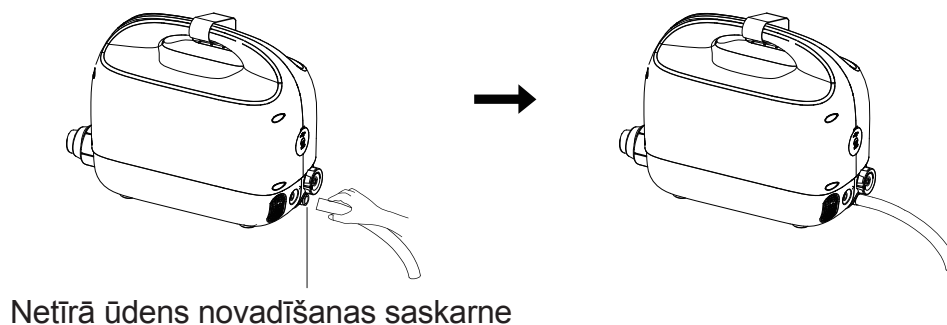


3.3 Dušas galviņas uzstādīšana kopā ar galveno ierīci

3.3.1 Turiet dušas galviņas saskarni, pielīdziniet to galvenās ierīces saskarnei un, lai to ievietotu, stingri nospiediet, lai to ievietotu. Pēc tam pagriežiet dušas galviņas saskarni pulksteņrādītāja kustības virzienā, cieši pievelkot to pie galvenās ierīces.

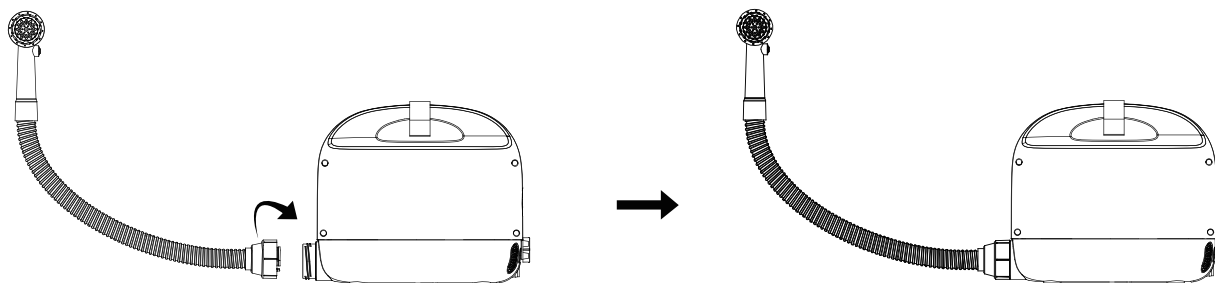

3.4 Uzstādiet adapteri ar galveno ierīci

Turiet adaptera saskarni, izlīdziniet to ar atbilstošo galvenās ierīces saskarni, ievietojiet to un pagriežiet, lai droši nostiprinātu.

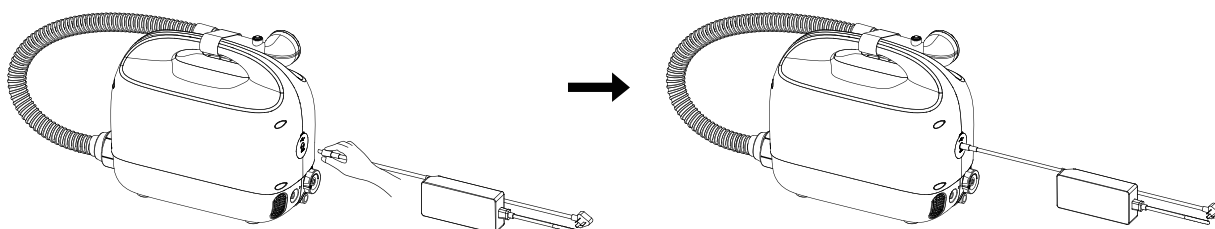

4.1 Sagatavošanās pirms ierīces iedarbināšanas

4.1 Sagatavošanās darbi pirms ieslēgšanas;

4.1.1 Pārļiecinieties, vai dušas galviņas caurule ir droši savienota ar galveno ierīci;

4.1.2 Izvēlieties atbilstošu dušas galviņu;

4.1.3 Sagatavojiet tīru ūdeni piemērotā temperatūrā.


4.2 Pārbaude un sagatavošana pirms dušas

4.2.1 Ieslēdziet strāvu un nospiediet strāvas slēdzi, lai pārbaudītu, vai ierīci var pareizi lietot. 4.2.2 Lūdzu, vēlreiz pārbaudiet, vai silikona un sūkļa dušas galviņas ir tīras. Ja uz tām ir netīrumi, pirms lietošanas tos rūpīgi notīriet;


4.2.3 Pārbaudiet, vai nav bojāta silikona matu mazgāšanas dušas galviņa, sūkļa dušas galviņa vai netīrā ūdens atpakaļsūkņēšanas caurule. Ja ir kādi bojājumi, laikus tās nomainiet;

4.2.4 Pārbaudiet, vai no galvenās ierīces nenāk kāds neparasts troksnis. Ja tiek konstatēts kāds neparasts troksnis, noskaidrojiet tā cēloni un novērsiet to pirms ierīces lietošanas;

4.2.5 Pārbaudiet, vai silikona/sūkļa dušas galviņa ir pareizi uzstādīta;

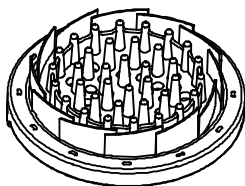

Silikona dušas galviņa

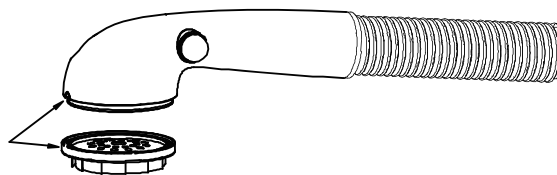

Salāgojiet to ar turētāju, iespiediet to uz iekšu un pārbaudiet, vai nav ūdens noplūdes.

4.2.6 Pārļiecinieties, vai iztukšošanas vārsts ir aizvērts;

4.2.7 Novietojiet dušas piederumus viegli sasniedzamā vietā;


4.2.8 Dušas vide: labāk, ja vannas istabas temperatūra ir augstāka par 26°C;

leteicams dušā mazgāties telpā ar gaisa kondicionētāju vai izmantot cita veida apsildi;

4.2.9 Sagatavojiet sausus dvieļus un matu žāvētāju.

4.3 Tīrīšanas/skrubēšanas darbības soļi

4.3.1 Pievienojiet sūkļa tīrīšanas/skrubera galviņu;

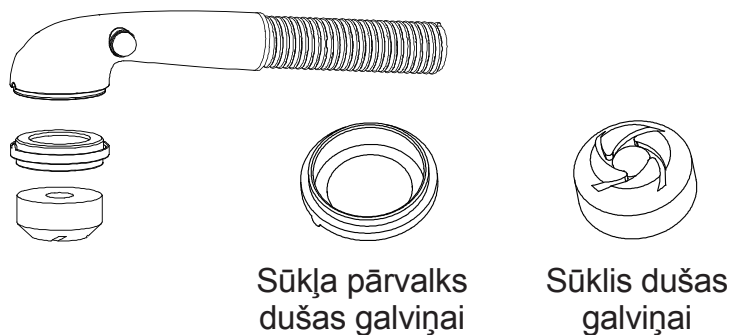


4.3.2 Nospiediet strāvas slēdzi, lai nodrošinātu tās padevi galvenajai ierīcei. (Neieslēdzot strāvas slēdzi, citus funkcionālos režīmus nevar aktivizēt);

4.3.3 Īsi nospiediet tīrīšanas pogu, lai ieslēgtu attiecīgo funkciju, un atbilstoši lietotāja sajūtām, vēlreiz īsi nospiediet tīrīšanas pogu, lai pārslēgtos starp parasto un uzlabotās jaudas režīmu;


4.3.4 Turiet dušas rokturi, nospiediet un turiet ūdens izsmidzināšanas slēdzi un kustiniet sūkļa masāžas dušas galviņu uz priekšu un atpakaļ, lai samitrinātu ādu;



4.3.5 Uzklājiet uz ādas ķermeņa mazgāšanas līdzekli vai šķidrās ziepes;

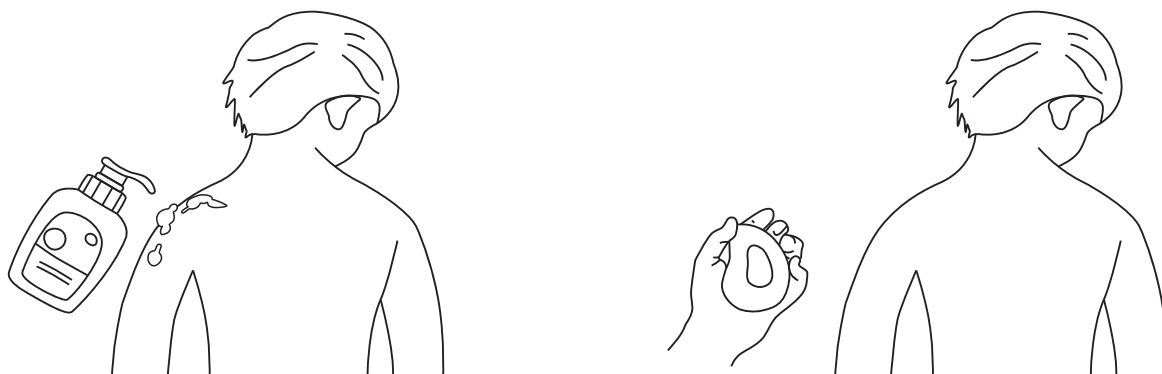

4.3.6 Turot dušas sūkšanas galviņu, novietojiet to tuvu cilvēka ādai, nospiediet un turiet tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi, kustiniet to uz priekšu un atpakaļ pa ādu, līdz tā ir nomazgāta tīra;

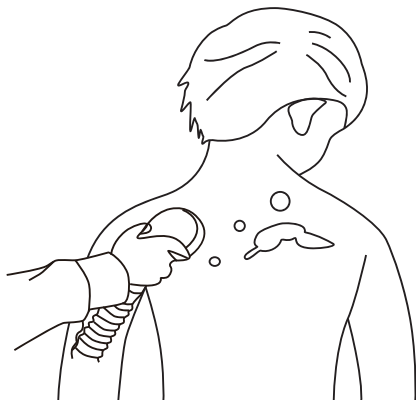

4.3.7 Pēc tīrīšanas āda būs nedaudz mitra. Jūs varat izmantot sausu dvieli, lai ādu nosusinātu atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām.




4.3.8 Piesardzības pasākumi:

4.3.8.1 Pirms skrubēšanas sūkļa dušas galviņa ir jāpietuvina ādai, pirms tiek nospiests ūdens izsmidzināšanas slēdzis;


4.3.8.2 Skrubēšanas laikā sūkļa dušas galviņa jāpiespiež tuvu ādai, pretējā gadījumā ūdens iztecēs;

4.3.8.3 Skrubēšanas beigās atlaidiet pogas slēdzi un pagaidiet divas sekundes līdz brīdim, kad tiks pārtraukta ūdens izsmidzināšana, pirms sūkļa dušas galviņu atvirzīt prom no ādas, pretējā gadījumā ūdens izplūds;

4.3.8.4 Saskaroties ar grūti tīrāmām vietām, piemēram, starp pirkstiem, padusēm un cirkšņiem, uzmanīgi noslaukiet tās ar sausu dvieli.

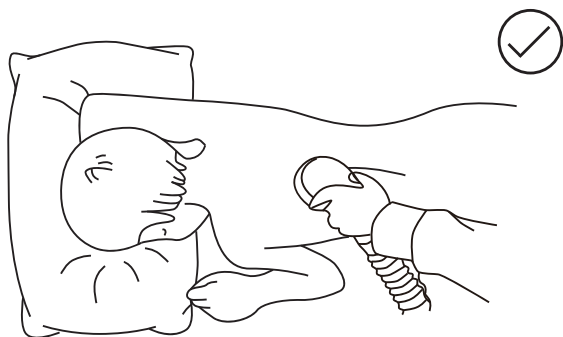

Pareiza darbība: Sūkļa skrubēšanas galviņa cieši pieguļ ādai

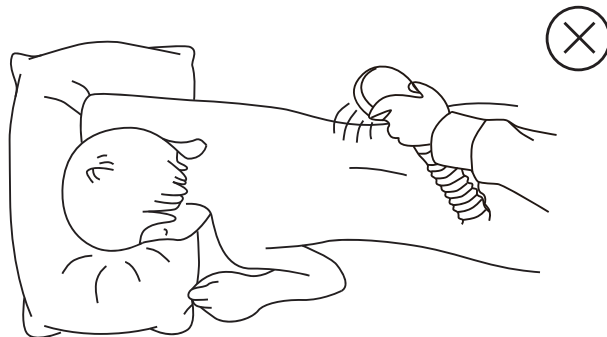

Nepareiza darbība: Ja sūkļa dušas galviņa nav pielikta ādai, nav atlaists ūdens izsmidzināšanas slēdzis un nav uzgaidīts divas sekundes.

4.4 Matu mazgāšanas darbības soļi

4.4.1 Uzstādiet silikona matu mazgāšanas dušas galviņu un pēc vajadzības ievietojiet atbilstošo silikona matu mazgāšanas galviņu;

4.4.2 Lai ieslēgtu ierīci, ilgi nospiediet ieslēgšanas pogu, īsi nospiediet matu mazgāšanas pogu, lai ieslēgtu matu mazgāšanas funkciju, un atkarībā no lietotāja vajadzībām turpiniet turēt piespiestu matu mazgāšanas pogu, lai pārslēgtos starp parastā un pastiprinātas jaudas režīmu;

4.4.3 Turiet silikona matu mazgāšanas dušas galviņu, pietuviniet silikona dušas galvu tuvu galvas ādai, nospiediet un turiet tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi, pārvietojiet galviņu uz priekšu un atpakaļ, lai samitrinātu matus (skatiet 1. att.);

4.4.4 Uzklājiet uz matiem šampūnu bez skalošanas vai putu šampūnu (skatiet 2. att.);



1.attēls



2.attēls

4.4.5 Turot dušas rokturi, pielieciet silikona dušas galviņu tuvu galvas ādai, nospiediet un turiet tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi, lai kustinātu galviņu uz priekšu un atpakaļ, līdz putas ir nomazgātas;



4.4.6 Tīrīšanas metode gariem matiem: ar vienu roku ir jāpaceļ tīrīšanai paredzētie matu gali, ar otru roku turot dušas rokturi tuvu plaukstai. Tīrīšanas soļi ir tādi paši kā iepriekš minētie;



Ja jums ir biezi un gari mati, ieteicams izmantot pīles klipšus, lai sadalītu matus 2-3 slāņos un mazgātu tos pa slāņiem.

4.4.7 Ja pēc mazgāšanas mati ir nedaudz mitri, varat tos nosusināt ar dvieli vai izmantot fēnu.



4.4.8 Piesardzības pasākumi:

4.4.8.1 Pirms matu mazgāšanas silikona dušas galviņa ir jāpiespiež tuvu galvas ādai, pirms tiek nospiests ūdens izsmidzināšanas slēdzis;

4.4.8.2 Matu mazgāšanas laikā silikona dušas galviņai ir jābūt tuvu galvas ādai, pretējā gadījumā ūdens izplūdis;

4.4.8.3 Matu mazgāšanas beigās vispirms atlaidiet pogas slēdzi un pagaidiet divas sekundes līdz pārtrauksies ūdens izsmidzināšana, pretējā gadījumā ūdens iztecēs.



Pareiza darbība: tuvu galvas ādai, vispār nav pilēšanas.




Nepareiza darbība: sasvērusies, daļēji no galvas ādas, neliels pilošs daudzums.



Nepareiza darbība: ja dušas galviņa nav tuvu galvas ādai, neatlaižot tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi, izsmidzinās liels ūdens daudzums, kas samitrina pašu lietotāju.

4.5 Dušas darbības soļi

4.5.1 Uzstādiet sūkļa dušas galviņu;

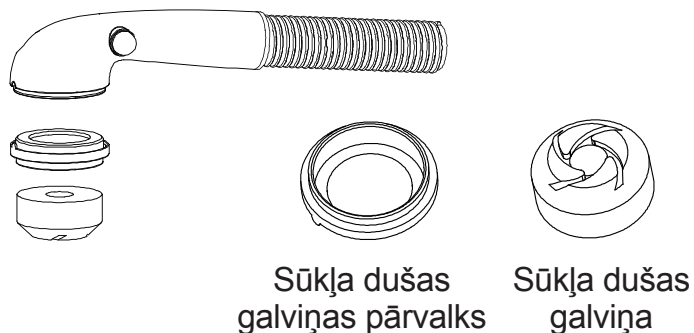


4.5.2 Nospiediet jaudas slēdzi, lai nodrošinātu strāvas padevi galvenajai ierīcei. (Neieslēdzot jaudas slēdzi, citus funkcionālos režīmus nevar aktivizēt);

4.5.3 Īsi nospiediet dušas pogu, lai ieslēgtu dušas funkciju, un atbilstoši lietotāja sajūtām vēlreiz īsi nospiediet dušas pogu, lai pārslēgtos starp parastās un paaugstinātas jaudas režīmu;

4.5.4 Turiet rokā dušas rokturi un nospiediet tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi, lai samitrinātu visu ķermeni;



4.5.5 Uzklājiet uz ādas ķermeņa mazgāšanas līdzekli vai ziepes;

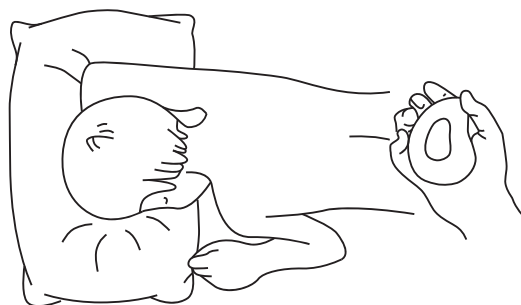

4.5.6 Turot dušas rokturi, nospiediet un turiet tīra ūdens izsmidzināšanas slēdzi un izsmidziniet uz ādas, līdz putas ir nomazgātas;



4.5.7 Pēc tīrīšanas izmantojiet dvieli, lai nosusinātu ūdeni.



4.6 Sakopšana pēc lietošanas

4.6.1 Pēc vannošanas pabeigšanas turiet ilgi nospiediet strāvas slēdzi, lai izslēgtu iekārtu, un nolieciet to nost. Strāvas adapteris, atveriet drenāžas vārstu, lai izvadītu netīro ūdeni, un pēc šīs darbības to savlaicīgi aizveriet. (Piezīme: galvenā ierīce nevar darboties netīrā ūdens izvadīšanas procesa laikā);


4.6.2 Tīrīšana: skatīt sadaļu "Uzturēšana un kopšana";

4.6.3 Ierīces novietošana: novietot sausā un vēsā vietā;


4.6.4. Sūkļa matu mazgāšanas komplekts ir izjaukts un notīrīts, izžāvēts un pēc tam atkal salikts kopā, lai to varētu izmantot atkārtoti (Ieteikums: silikona matu mazgāšanas pārvalks un skrubja tīrīšanas galviņa, kas paredzēta īpašai personai).

4.7 Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana (kā parādīts)

4.7.1 Sakļaujiet netīrā ūdens cauruli ar galvenās ierīces kanalizācijas caurules savienojumu un stingri iespiediet to uz iekšpusi;

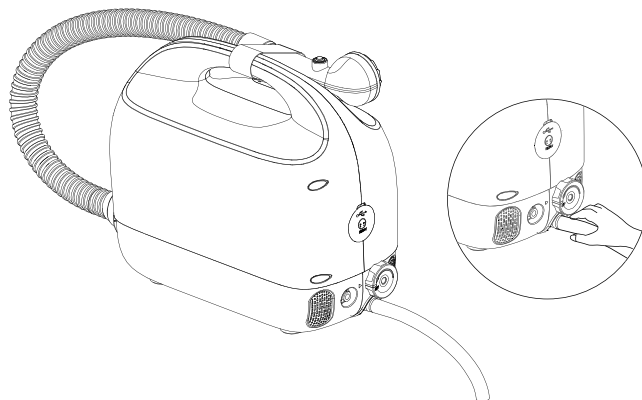

4.7.2 Pagrieziet drenāžas vārstu pulksteņrādītāja kustības virzienā par 90°, lai ļautu izplūst netīrajam ūdenim. Pēc netīrā ūdens izvadīšanas pabeigšanas pagrieziet drenāžas vārstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam par 90°, lai to aizvērtu.

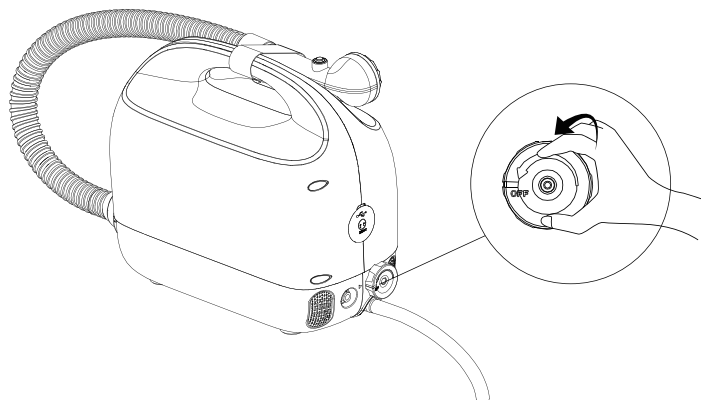

5. Izplatītāko problēmu novēršanas metodes

Biežāk sastopamās kļūdas, kuras lietotāji var mēģināt atrisināt paši. Saskaroties ar kļūmēm, kuras lietotāji paši nevar novērst, savlaicīgi jāsazinās ar ražotāju, lai atrastu speciālistu, kas problēmas novērsīs.

Biežāk sastopamās kļūdas	Kļūdu cēloņa analīze	Problēmu novēršanas metodes
No tīra ūdens izplūdes atveres netek ūdens	Pārbaudiet, vai galvenā ierīce ir ieslēgta	Pievienojiet strāvas padevi, nospiediet slēdzi un izvēlieties jebkuru režīmu, lai pārbaudītu.
	Netīrā ūdens tvertne ir pilna	Izvadiet netīro ūdeni
No netīrā ūdens tvertnes neizplūst ūdens	Netīrā ūdens tvertne vai kanalizācijas caurule ir aizsprostota ar svešķermeņiem	Tīrīšana
	Netīrā ūdens tvertnē nav ūdens	Nav nepieciešama nekāda rīcība
Dušas ierīce nelāgi ož.	Netīra netīrā kanalizācijas iesūkšanas caurule un netīrā ūdens tvertnes iekšpuse	Nepieciešama regulāra sterilizācija un tīrīšana
Dušas galviņas noplūde vai netīrā ūdens sūkšanas kļūda.	Dažas silikona matu mazgāšanas galviņas sūkšanas atverēm ir bloķētas ar netīrumiem.	Jāveic silikona iesūkšanas atveres un izsmidzinātāja filtra tīrīšana
	Starp silikona matu mazgāšanas galviņu un dušu ir atstarpe	No jauna uzstādiet silikona matu mazgāšanas galviņu
	Ventilatora jauda vāja vēja līmenī	Mainiet uz stipra vēja līmeni

6. Ierīces specifikācijas


Nosaukums	Pārnēsājamā gultas dušas iekārta	Ievades spriegums	AC100-220V
Modelis	ZW186	Izvades spriegums	24V
Svars	4.8kgs	Darba strāva	5.8A
Krāsa	Balta	Jauda	140W
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	5.2L	Izmantošanas veids	Iekštelpas
Trokšņu līmenis	≤55db	Darba vide	Temperatūra: 10 - 40 °C
Maksimālais ieplūdes spiediens	35KPA		Mitrums: 30 - 75% RH
Ierīces izmērs	406x356x208mm	Uzglabāšanas vide	Temperatūra: 0 - 40 °C
Iepakojuma izmērs	510x395x430mm		Mitrums: 45 - 75% RH

7. Apkope


7.1 Visi ikdienas uzturēšanas un kopšanas darbi jāveic, kad ierīce ir izslēgta;

7.2 Korpusa tīrīšana: pieejamas mitras lupatas un citi elastīgi materiāli; korpusa tīrīšanā nedrīkst izmantot tērauda stiepļu lodītes, suku un citus cietus materiālus, kā arī tieši neskalojiet korpusu ar ūdeni. Var izmantot parastos mazgāšanas līdzekļus, piemēram, trauku mazgāšanas šķidrumu, bet ne petroleju, benzīnu un citus kodīgus šķidrumus. (Tīrot ūdens padeves cauruli un netīrā ūdens tvertni, vispirms jānoņem filtrs no izsmidzināšanas sūkšanas galviņas);

7.3 Filtra noņemšanas process: vispirms izņemiet silikona matu mazgāšanas galviņu - pagriežiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atskrūvētu - varat noņemt filtru;

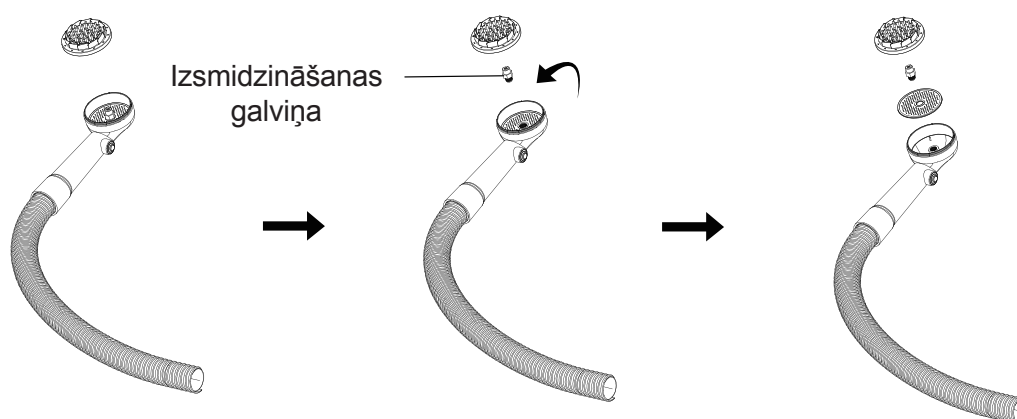


7.4 Tīra ūdens caurules tīrīšana: ieslēdziet strāvas slēdzi, izvēlieties jebkuru dušas mazgāšanas režīmu, iesūciet iepriekš sagatavotu tīrīšanas un dezinfekcijas ūdeni caur filtrēto ūdens attīrīšanas cauruli, pēc tam nospiediet un turiet ūdens izplūdes slēdzi, lai izsmidzinātu ūdeni, un novērojiet, vai no dušas galviņas izvadītais ūdens izplūst tīrs;

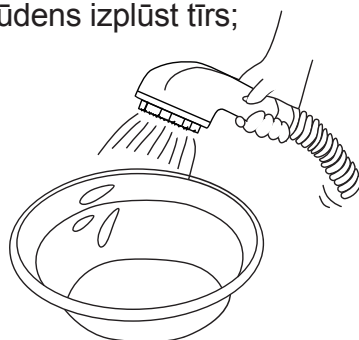

Vērojiet, vai no dušas galviņas izvadītais ūdens izplūst tīrs.

7.5 Caurules un netīrā ūdens tvertnes tīrīšana: nospiediet strāvas padeves slēdzi, izvēlieties skrubēšanas vai matu mazgāšanas režīmu, lai 1/2 dušas galviņas ievietotu sagatavotajā tīrīšanas un dezinfekcijas ūdenī, iekļūtu netīrā ūdens tvertnē pa kanalizācijas iesūkšanas cauruli, atvienojiet līdzstrāvas kabeli, atbilstoši sakratiet galveno ierīci, lai iztīrītu netīrā ūdens tvertni, un atveriet izplūdes vārstu, lai iztukšotu tvertni;

7.6 Sagatavojiet spaini ar tīru ūdeni un atkārtojiet 7.4 un 7.5 punktu darbības, lai noņemtu tīrīšanas un dezinfekcijas ūdens atlikumus. (Iepriekšminētās darbības laikā ūdens tīrīšanas izplūdes slēdzi nedrīkst iegremdēt ūdenī);

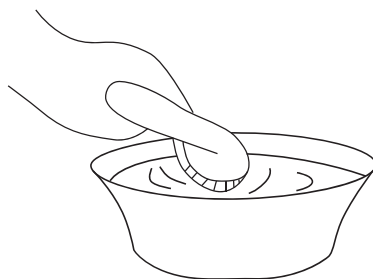

Ievelciet tīru ūdeni, iztīriet netīrā ūdens tvertni un atgaitas cauruli

7.7 Notekūdeņu iesūkšanas caurulē var būt ūdens atlikumi, tāpēc dušas galviņa ir jānoņem, lai atbrīvotu no atlikušā ūdens;

7.8 Pēc silikona matu mazgāšanas galviņas vai sūkļa tīrīšanas galviņas lietošanas tās ir jāmērcē un jānotīra ar medicīnisko dezinfekcijas ūdeni. Pēc tam jānoskalo ar siltu ūdeni, lai noņemtu dezinfekcijas līdzekli, pirms tās var atkal lietot vai aizstāt ar jaunām dušas galviņām;

7.9 Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, jāveic šādi pasākumi:

7.9.1 Tā jānovieto vēsā un vēdināmā vietā, lai ierīce būtu sausa un novērstu detaļu bojājumus;

7.9.2 Neturiet galveno ierīci ieslēgtu;

7.9.3 Pēc tam, kad ierīce ir izžāvēta gaisā, tai jābūt noslēgtai ar plastmasas maisiņu, lai novērstu putekļu iekļūšanu ierīcē;

7.9.4 Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izmantojiet silikona aizbāžņus, lai bloķētu ieplūdes un ūdens caurules izplūdes atveri.

8. Produkta pārstrāde

Kad šī izstrādājuma lietošanas derīguma termiņš būs beidzies, lūdzu, utilizējiet to atbilstošā vietā, lai aizsargātu vidi.

9. Garantija

Kvalitātei ir viena gada garantija, izņemot jebkādu ārējo spēku bojājumus.

9.1 Garantijas atspoguļojums:

9.1.1 Saglabāji un pareizi aizpildiet "Produkta garantijas karti". (Skatiet produkta garantijas karti, lai iegūtu sīkāku informāciju); 9.1.2 Uzņēmums sniedz bezmaksas garantijas remonta pakalpojumus viena gada laikā nopirkuma datuma; 9.1.3 Produktiem, kuru garantijas termiņš pārsniedz noteikto vienu gadu, remonta pakalpojums tiek veikts par samaksu;

9.1.4 Precēm garantijas periodā, ja bojājums nav labojams vai modeļa daļas vairs nav pieejamas, uzņēmums piedāvā tādas pašas vai augstākas kvalitātes izstrādājuma nomaiņu, kura vērtība nav zemāka par oriģinālo produktu. Ja tādas pašas kategorijas prece nav pieejama, ar lietotāja piekrišanu kā nomaiņu tiek nodrošināta augstākas kvalitātes jauna prece, taču ir jāmaksā cenas starpība, kas aprēķināta, pamatojoties uz tirgus cenu nomaiņas dienā.

9.2 Garantijas izņēmumi:

9.2.1 Pirkums, kas veikts vairāk nekā pirms gada;

9.2.2 Tā netiek lietota pareizi saskaņā ar instrukcijām;

9.2.3 Neizmanto mūsu uzņēmuma ražotās detaļas;


9.2.4 Detaļas tika bojātas negadījuma rezultātā;

9.2.5 Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem, piemēram, silikona dušu, sūkļa dušu, sūkļa dušas pieslēguma atveri, kanalizācijas šļūteni u.t.t.;

9.2.6 Citi bojājumi, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.


Simbols	Paskaidrojums	Simbols	Paskaidrojums
	Partijas kods		Kataloga nummurs
	Brīdinājumi un piesardzības pasākumi		Nesterils
	Medicīniska ierīce		Ražošanas datums
	Ražotāja nosaukums un adrese		Pilnvarotais pārstāvis Eiropas komisijā
	Ce marķējums		Ražošanas valsts
	Importētājs		Unikālais ierīces identifikators
	Pilnvarotais izplatītājs Eiropā		Modeļa numurs
	Tipa B pielietojuma daļa		Roku saspiešanas brīdinājums
	Atsevišķs marķējums atkritumiem, kas saistīti ar elektroiekārtām		Izvairīties no saules

Pilnvarotais izplatītājs Eiropā

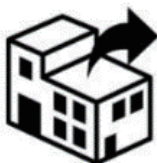

SIA "MĀJAS APRŪPE"
 Reģ.Nr.40003553254
 Faktiskā adrese: Ernestīnes 24 – 2, Rīga, LV – 1046
 Tālrunis: +371 29 35 21 21

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas komisijā

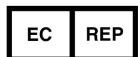

SUNGO Europe B.V.
 Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands SRN:NL-AR-000000247

Ražotājs



Uzņēmums: Shenzhen Zuowei Technology Co.,Ltd.
 Adrese: Floor 2nd,Building 7th, Yi Fenghua innovation industrialpark,Xinshi Subdistrict,
 Dalang street, Longhua District,Shenzhen
 Tel: 0755-23739060

Produkta garantijas karte

Garantijas karte:

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktus! Normālas lietošanas apstākļos, ja rodas problēmas ar pašu produktu, mēs nodrošināsim bezmaksas remontu. Galvenajai ierīcei ir viena gada garantija (no rēķina datuma), bet šļūtenes komplektam un dušas galvai ir pusgada garantija. Ja garantijas periods ir beidzies un ir nepieciešama patēriņa daļu nomaiņa vai remonta piederumu iegāde, tiks piemērota maksa.

- 1. Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat produktu saskaņā ar instrukcijām.
- 2. Garantijas karte neattiecas uz bojājumiem vai kļūdām, kas radušās cilvēka darbības, nejaušu apstākļu (ugunsgrēks, ārēja spiediena, krišanas utt.) vai dabas katastrofu (zemestrīces, taifūna, zibens u.t.t.) dēļ.
- 3. Atdalīšana ir aizliegta. Ja atdalīšana rada bojājumus, garantijas pakalpojums netiks sniegts.

Nosaukums: _____

Modelis: _____

Sērijas Nr. : _____

Pirkuma datums: _____

Lietotāja vārds: _____

Lietotāja tālruņa numurs: _____

Lietotāja adrese: _____

Izplatītāja nosaukums un adrese: _____



Mājaslapa: www.majasaprupe.lv
E-pasts: info@majasaprupe.lv